

# Kehlkopfspiegel FS Rhodium




**Kehlkopfspiegel FS Rhodium** sind mit Rhodium auf der Glasoberfläche verspiegelt. Rhodium ist ein Edelmetall wie Gold und ist als Edelmetall chemisch resistent, selbst gegenüber Säuren.

**Die Qualitätsmerkmale sind:**


**Exakt scharfes kontrastreiches Spiegelbild bis ins kleinste Detail**

Nur eine Reflexion  
→ exakt scharfes Bild

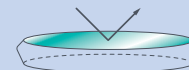

Front Surface Beschichtung

Doppelte Reflexion  
→ Doppelbild

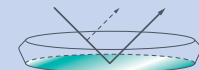

Rear Surface Beschichtung

**Brillant farbnatürlich und angenehm hell**  
bei einem optimal gleichmäßigen Reflexionsspektrum

**Höchster Seh-Komfort**  
ermüdungsfrei und Augen schonend in allen Einsatzbereichen

**Einfache Reinigung**  
durch die spezielle HAHNENKRATT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

**Absolut resistent**  
gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation bis hin zu säurehaltigen Refresh-Reinigern.



Kehlkopfspiegel Rhodium plan	Ø in mm	REF ohne Gewinde	REF mit Gewinde	REF Spiegel mit Griff sechskant	REF Spiegel mit Griff rund
Stück	6	H951RX06	H950RX06	H956RX06	H957RX06
	8	H951RX08	H950RX08	H956RX08	H957RX08
	10	H951RX10	H950RX10	H956RX10	H957RX10
	12	H951RX12	H950RX12	H956RX12	H957RX12
	14	H951RX14	H950RX14	H956RX14	H957RX14
	16	H751RX16	H750RX16	H756RX16	H757RX16
	18	H751RX18	H750RX18	H756RX18	H757RX18
	20	H751RX20	H750RX20	H756RX20	H757RX20
	22	H751RX22	H750RX22	H756RX22	H757RX22
	24	H751RX24	H750RX24	H756RX24	H757RX24
	26	H751RX26	H750RX26	H756RX26	H757RX26
	28	H751RX28	H750RX28	H756RX28	H757RX28
30	H751RX30	H750RX30	H756RX30	H757RX30	

Kehlkopfspiegel   Griff	REF	REF		
Stück	400	440		