

BLACKline

Mit einer DLC – Diamond Like Carbon – Beschichtung erhalten die Instrumente ein High-End Finish.

Durch die tiefschwarze und matte Oberfläche werden störende Reflektionen eliminiert. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Arbeit unter dem Mikroskop, die in der Endodontie immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Die BLACKline verbinden Komfort und Ergonomie und bieten in allen Bereichen der Diagnostik entscheidende Vorteile.

BLACKline

Sonden


Die Griffe mit DLC-Beschichtung sind hohl und liegen so ausgewogen leicht in der Hand. Das griffige Design sowie die Mulde sorgen für ein sicheres Zugreifen und für eine angenehme Haptik. Durch die tiefschwarze und matte Oberfläche werden störende Lichtreflektionen eliminiert.

Die Sonden-Spitzen werden aus Medizinstahl gemäß EN ISO 7492 hergestellt und bieten eine hohe Bruchfestigkeit und Elastizität.

Die Griffe sind auch für Mundspiegel erhältlich.

Die Sonden sind permanent montiert.

Autoklavierbar bei 134°C

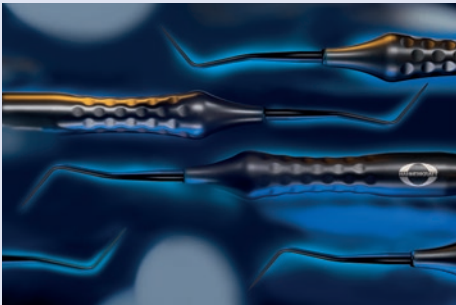

BLACKline ERGOtouch Sonden / Stück	REF				
	Form A 010 Fig. 23	Form C 030 Fig. 8	Form D 040 Fig. 9	Form F 060 Fig. 6	Form G 070 Fig. 17
	B600A	B600C	B600D	B600F	B600G

Die Sonden sind permanent montiert.

BLACKline ERGOtouch Griffe / Stück	SS-Gewinde	CS-Gewinde
	B442	B443

*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.

