

MEGA FS

FRONT SURFACE


Der MEGA FS ist die Alternative zum MEGA FS Rhodium. Rhodium ist um ein Vielfaches teurer als Gold. Um alternativ einen preislich günstigeren Front Surface Mundspiegel anbieten zu können, haben wir auf der Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung eine einzigartige Kombination von hoch reflektierenden Schichten entwickelt, die selbst gegenüber Säuren resistent ist. Das Ergebnis ist der MEGA FS.

Beide Mundspiegel unterscheiden sich darin, dass die Reflexion des Rhodiums farblich einen Touch »wärmer« und die der FS Kombi-Schicht einen Touch »kälter« erscheint.




Exakt scharfes, kontrastreiches Spiegelbild bis ins kleinste Detail

Nur eine Reflexion
→ exakt scharfes Bild

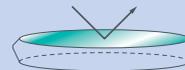

Front Surface Beschichtung

Doppelte Reflexion
→ Doppelbild

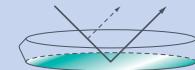

Rear Surface Beschichtung

Brillant farbnatürlich und angenehm hell
bei einem optimal gleichmäßigen Reflexionsspektrum

Höchster Seh-Komfort
ermüdungsfrei und Augen schonend in allen Einsatzbereichen

Einfache Reinigung
durch die spezielle HAHNENKRATT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

Absolut resistent
gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation bis hin zu säurehaltigen Refresh-Reinigern.



MEGA FS Mundspiegel		REF	
12-Pckg. Größe	Ø in mm	SS-Gewinde	CS-Gewinde
		plan	plan
4	22	6 560	6 565
5	24	6 561	6 566