


ERGOtouch

ERGOtouch

ERGOtouch SONDEN

ERGOtouch GRIFFE FÜR MUNDSPIEGEL

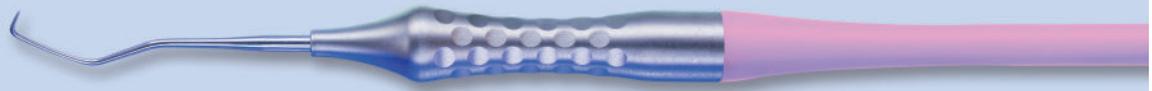

ERGOtouch Griffe

aus satiniertem Edelstahl sind hohl und liegen so ausgewogen leicht in der Hand. Das griffige Design sowie die Mulde sorgen für ein sicheres Zugreifen und für eine angenehme Haptik. Durch die satinierte Oberfläche werden störende Lichtreflexionen eliminiert.

Die farbigen Griffenden bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, der seit 2015 erfolgreich in der Praxis eingesetzt wird. Dieser ist autoklavierbar, farb- und formstabil sowie resistent gegenüber Säuren und Plaque-Indikatoren.

ERGOtouch Sonde

aus Medizinstahl gemäß EN ISO 7492 bietet eine hohe Bruchfestigkeit und Elastizität.

Die Sonden sind permanent montiert.

Autoklavierbar bei 134°C



ERGOtouch duo Sonden (permanent montiert)



ERGOtouch Sonden, einseitig (permanent montiert)

	Griffe für Mundspiegel	Form A 010 Fig. 23	Form C 030 Fig. 8	Form D 040 Fig. 9	Form F 060 Fig. 6	Form G 070 Fig. 17	
	REF Stück	REF Stück	REF Stück	REF Stück	REF Stück	REF Stück	
1	Edelstahl	667	667A+...	667C+...	667D+...	667F+...	667G+...

ERGOtouch duo kann in allen Varianten kombiniert werden, z.B. REF 667A+C / 667A+D

2	Edelstahl	442 (SS) 443 (CS)	600A	600C	600D	600F	600G
---	-----------	----------------------	------	------	------	------	------

SS: einfacher Stiel
CS: konischer Stiel

	weiß	620	620A	620C	620D	620F	620G
	pastell gelb	621	621A	621C	621D	621F	621G
	pastell blau	622	622A	622C	622D	622F	622G
	pastell mint	623	623A	623C	623D	623F	623G
	pink	624	624A	624C	624D	624F	624G
	pastell flieder	625	625A	625C	625D	625F	625G
	anthrazit	626	626A	626C	626D	626F	626G