

SEplus

MUNDSPIEGEL

HOHE QUALITÄT IN JEDEM DETAIL

Seit Jahrzehnten vertrauen Zahnärzte weltweit auf die hohe Qualität unserer SEplus.

Mundspiegel werden in der Praxis jeden Tag viele Male desinfiziert und sterilisiert. Bei diesen extremen Belastungen ist die hohe Qualität – in jedem Detail – entscheidend.



Beste Reflexion und Bildqualität



Die SEplus-Verspiegelung mit einer fünffachen reinen Silberschicht garantiert eine besonders hohe Reflexion. Das Ergebnis ist ein Spiegelbild, das sich durch eine verzerrungsfreie, farbnatürliche, helle und brillante Bildqualität auszeichnet. In dieser Kombination ermöglichen sie ein ermüdungsfreies Sehen.

Beste Korrosionsfestigkeit

Der Edelstahl ist nach unserer Erfahrung von mehr als 50 Jahren korrosionsfest, er entspricht der Norm ISO 7153-1 (Surgical Instruments – Metallic Materials).

Beste Resistenz gegenüber Desinfektion und Sterilisation

Die Silberverspiegelung wird durch eine von uns entwickelte, kombinierte Kupfer/Titan- Beschichtung geschützt und zusätzlich durch einen Schutzlack versiegelt. Diese einzigartige Kombination sichert die extrem lange Haltbarkeit der SEplus Mundspiegel.

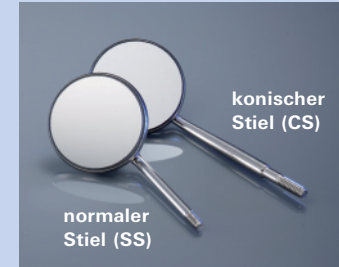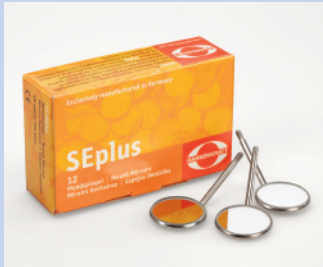

SEplus Mundspiegel		REF			
12-Pckg. Größe	Ø in mm	normaler Stiel (SS)		konischer Stiel (CS)	
		plan	vergrößernd	plan	vergrößernd
3	20	702X3	706X3	711X3	716X3
4	22	702X4	706X4	711X4	716X4
5	24	702X5	706X5	711X5	716X5